



CAD/CAM インレーは セラスマート 2014 年から 31,000 本の実績数の ベルデンタルにお任せください。

※再製保証はございません

デンタル便でも発売開始


支台歯形成のポイント

- point.1 咬合面の削除量は小窩裂溝部で 1.5mm を確保する
- point.2 隣接面は咬合力をサポート可能なボックスフォームとする

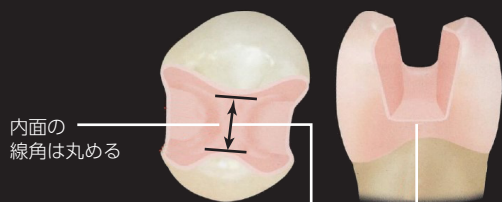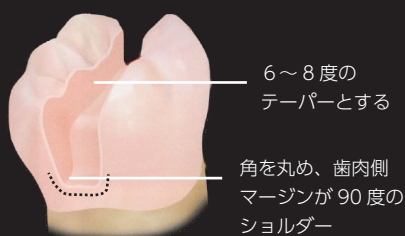

イスマス（狭窄部）でも 1.5 ～ 2.0mm を
確保する

マージンは
バットジョイントする

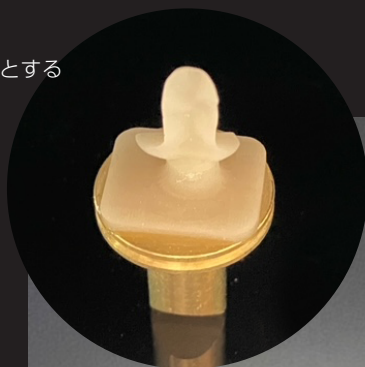

デンタル便 24
POWERED BY BELL DENTAL LABORATORY, INC.

<https://www.dentalbin24.net/>



セラスマートプライムインレー

対応部位 小臼歯 4 5

セラスマート 300 インレー

対応部位 大臼歯 6

※価格につきましては FIS にお問い合わせください。


セラスマートインレー対応シェード

プライム A1 A2 A3 A3.5 A4 300 A2 A3 A3.5

CAD/CAM 冠用材料の材料算定が変わりました。

機能区分	CAD/CAM 冠用材料 (II) セラスマートプライム	CAD/CAM 冠用材料 (III) セラスマート 300
適応部位	小臼歯	大臼歯
材料点数	181 点	350 点
シールカラー	グリーン	ブルー

※金属アレルギー症例のみ 7 番の適用可能

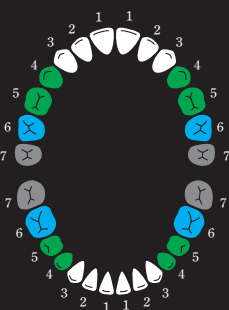

CAD/CAM クラウンの価格改正のお知らせ

4 月 1 日より CAD/CAM 冠に係る特定保険
医療材料改定に伴い販売価格を変更します。

セラスマートプライム

セラスマート 300

※価格につきましては FIS にお問い合わせください。

BELL
Dental
Laboratory, inc

歯科技工所
ベルデンタルラボラトリー株式会社
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 1-6-15
TEL. 03-3751-7202 FAX. 03-3751-9015

FIS
for innovative sales

本製品の問い合わせ先
有限会社 エフィス
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 1-6-15
TEL. 03-3751-0360 FAX. 03-3751-0463